

Delivery Manager

Software per la tracciabilità di farmaci e materiali.


- Visibilità completa degli ordini
- Metodi di trasporto flessibili
- Accesso semplice

Vuoi ridurre le interruzioni del flusso di lavoro della farmacia?

In ospedale la visibilità completa degli ordini, la flessibilità dei metodi di trasporto e l'accesso semplice sono fondamentali per garantire flussi di lavoro efficienti. Delivery Manager è la soluzione per la tracciabilità completa e in tempo reale di farmaci, campioni di sangue e altri materiali critici negli ospedali. L'integrazione di diversi metodi di trasporto, l'ottimizzazione dei flussi di lavoro e la riduzione delle interruzioni lo rende uno strumento essenziale per qualsiasi ospedale che voglia rendere più efficienti e sicuri i processi di consegna.

Vantaggi

- **Soluzione di tracciamento completa** Delivery Manager offre una soluzione completa che oltre ai sistemi di posta pneumatica integra altri metodi di trasporto manuali e automatizzati. Ciò garantisce la tracciabilità di tutti gli ordini dalla ricezione fino alla consegna al destinatario.
- **Informazioni in tempo reale** La posta pneumatica di Swisslog Healthcare comunica direttamente con il software Delivery Manager. Lo stato di ogni ordine inviato attraverso il sistema di posta viene aggiornato istantaneamente per eliminare possibili lacune informative.
- **Flusso di lavoro ottimizzato** Un unico punto di controllo, responsabilità chiare e tracciabilità per gli ordini dei pazienti: Delivery Manager connette il processo di distribuzione dei farmaci migliorando la logistica. Questo non solo aumenta l'efficienza della tracciabilità, ma riduce anche il rischio di errori di medicazione.

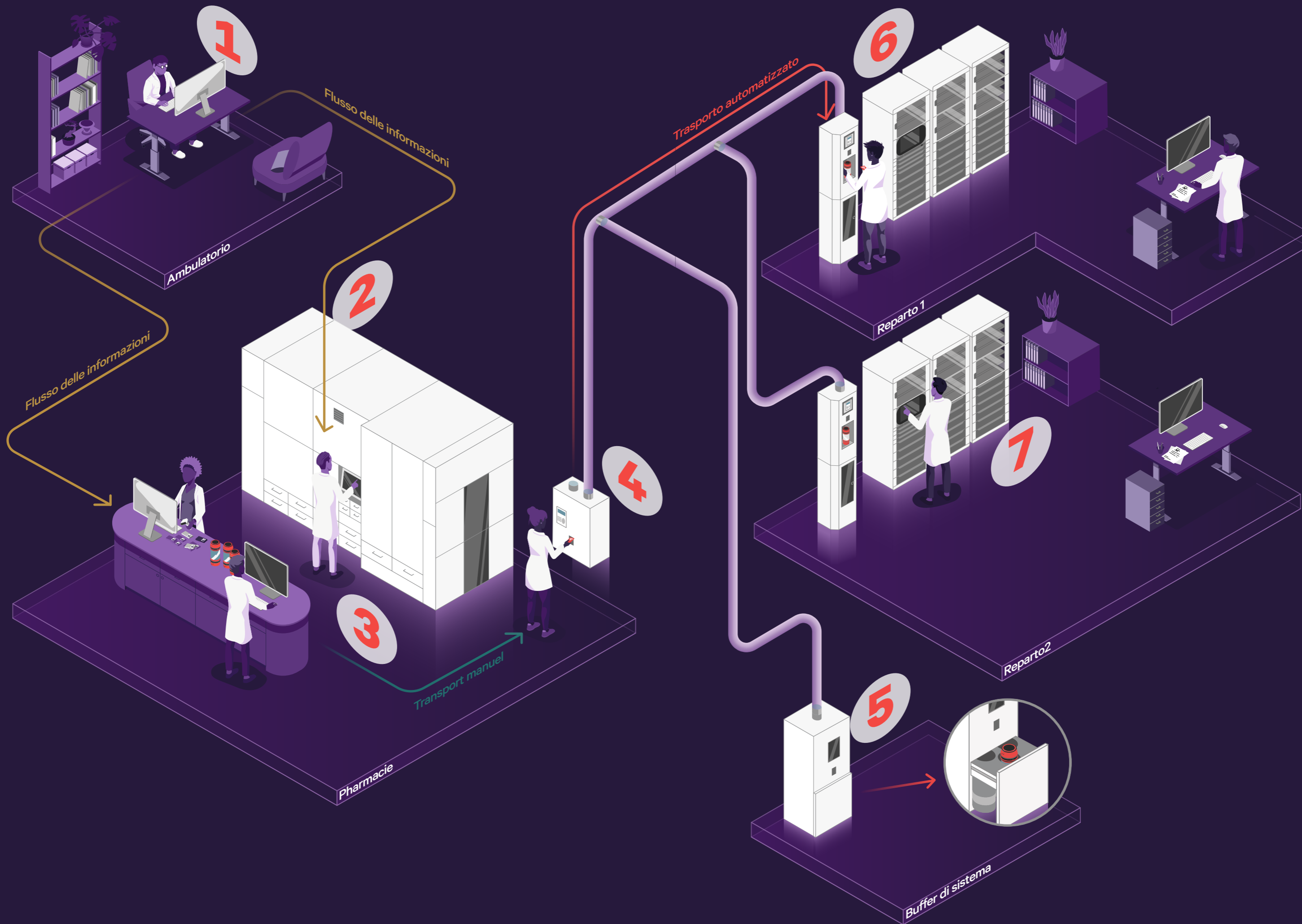

Delivery Manager controlla il materiale dal momento in cui viene ricevuto l'ordine in farmacia fino alla consegna ai pazienti.

Posta pneumatica

I sistemi di posta pneumatica sono fondamentali per il successo della consegna degli ordini dei pazienti. Delivery Manager si integra direttamente con il sistema di posta pneumatica TranspoNet di Swisslog Healthcare. La tecnologia RFID permette di tracciare e monitorare le spedizioni, e di gestire l'inventario. In questo modo è possibile verificare in tempo reale se la merce arriva nel posto giusto al momento giusto.

Trasporto manuale

La maggior parte dei farmaci viene trasportata manualmente nei reparti, che sia per i carrelli di terapia o per gli armadi informatizzati di reparto. Gli ospedali che monitorano solo le consegne tramite posta pneumatica non riescono quindi a tracciare la maggior parte dei farmaci. Delivery Manager colma questa lacuna: tutti gli ordini di trasporto manuale vengono monitorati per garantire che siano stati registrati correttamente e che siano rintracciabili.

- 1 Inserimento dell'ordine (prescrizione o ripristino scorte) tramite il sistema di gestione degli ordini
- 2 Il personale viene guidato nella scelta degli articoli da consegnare corretti
- 3 Gli articoli vengono scansionati e caricati nel contenitore per il trasporto (bossolo o cesta), e Delivery Manager garantisce che siano spediti correttamente
- 4 Quando il bossolo viene lasciato nella stazione di invio, TranspoNet rileva l'ID del bossolo e lo indirizza automaticamente a destinazione
- 5 Il bossolo viene temporaneamente immagazzinato nel buffer di sistema, e nel frattempo il personale sanitario riceve una notifica del bossolo in attesa
- 6 Il personale esegue autenticazione e può ritirare il bossolo
- 7 Il personale seleziona gli articoli e li immagazzina nell'armadio

Swisslog Healthcare

Via Taruffi 30/38

41053 Maranello

Italia

T: +39 0536 240 311

press@swisslog-healthcare.com

swisslog-healthcare.com